

## ジャーテスター 特別販売キャンペーン

2017年9月25日

旧モデルにつき、特別価格で販売致します。  
販売台数 残りは③の1台のみ です。  
購入ご検討中のお客様は、弊社までお問い合わせください。

### ① ~~JMD-3~~

★アナログタイマー1個装備

攪拌時間をタイマー設定でき、作業終了をブザーでお知らせします。

★ 底面・背面二元照射

底面と背面の2方向から蛍光灯照射が可能です。  
また、背面側照射部には、遮光板を装備しております。  
フラスコ背面白(照射)、黒(遮光)2パターンの観察状態を選ぶことができます。

- ・回転数は微調可能です。
- ・安定した回転速度を保ちます。
- ・回転速度は、見易いデジタル表示です。
- ・攪拌シャフトは、上下方向任意の位置に設定できます。
- ・薬液注入用パイプを装備しています。

売約御礼



### ② ~~JT-4A~~

★ デジタルタイマー3個装備

スイッチON, タイマー設定すれば攪拌、静置まで操作不要です！

スタート前に、第1ステップ(急速攪拌)・第2ステップ(緩速攪拌)・第3ステップ(静置)  
を各々タイマー設定しておけば、全作業が自動完了し、終了をブザーでお知らせします。

★ 作動時間積算計装備


各タイマーに加えて、作動時間積算計を装備しています。  
作動開始からの所要時間が一目で確認できます。

★ 底面・背面二元照射

底面と背面の2方向から蛍光灯照射が可能です。  
また、背面側照射部には、遮光板を装備しております。  
フラスコ背面白(照射)、黒(遮光)2パターンの観察状態を選ぶことができます。

- ・回転数は微調可能です。
- ・安定した回転速度を保ちます。
- ・回転速度は、見易いデジタル表示です。
- ・攪拌シャフトは、上下方向任意の位置に設定できます。
- ・薬液注入用パイプを装備しています。
- ・漏電ブレーカー装備しています。

売約御礼

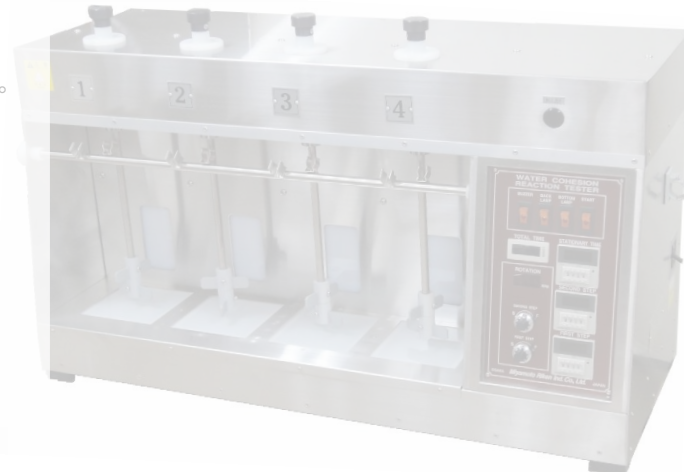

### ③ JMD-8TS

★アナログタイマー5個装備

スイッチON, タイマー設定すれば**攪拌、静置まで操作不要**です！

スタート前に、第1ステップ(第1攪拌)・第2ステップ(第2攪拌)・第3ステップ(第3攪拌)・第4ステップ(第4攪拌)・第5ステップ(静置)を各々タイマー設定しておけば、**全作業が自動完了**し、終了をブザーでお知らせします。

- ・回転数は微調可能です。
- ・安定した回転速度を保ちます。
- ・回転速度は、見易いデジタル表示です。
- ・攪拌シャフトは、上下方向任意の位置に設定できます。
- ・薬液注入用パイプを装備しています。
- ・背面蛍光灯照射が可能です。



<仕様>

型式	① <del>JMD-3</del>	② <del>JT-4A</del>	③ JMD-8TS
ビーカー架け数	3個	4個	8個
回転数検出方式	光学的非接触センサーによる電子計測方式		
攪拌回転数	20~180 r/min.		
タイマー	<del>アナログタイマー1個(～60分)</del>	<del>デジタルクォーツタイマー3個(～99分59秒)</del>	アナログタイマー5個(～10時間)
ACモーター	15W		25W
薬液注入管	6本	8本	16本
電源(AC)	100V-2A		
本体寸法 WxDxH	<del>510 x 325 x 590 mm</del>	<del>815 x 320 x 475 mm</del>	1210 x 390 x 455 mm
質量	20 Kg	30 Kg	50 Kg

通常価格	¥310,000	¥550,000	¥950,000
------	----------	----------	----------



特別価格	¥145,000	¥260,000	¥450,000
------	----------	----------	----------