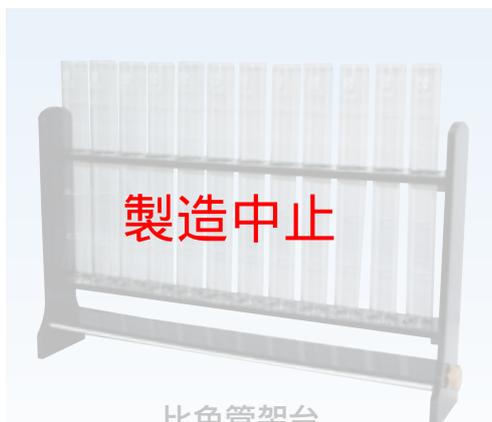


濁度用比色管  
3121-04光学用比色管  
3121-05

製造中止

比色管架台  
容器は付属しません

暗箱

容器は付属しません

## 規格

**濁度用比色管(100mL)** … 内径21.5mm全長370mmの底部から300mmの高さに100mLの標線をつけたもの。共通摺り合わせ共栓付き(¥19/28)

**光学用比色管(100mL)** … 内径25.5mm全長250mmの底部から50mmの高さに25mL・100mmの高さに50mL・200mmの高さに100mLの標線をつけたもの。(共栓なし)

## ■ 特長

濁度用比色管・光学用比色管ともに、底部は鏡面研磨したガラス板を溶着仕上げしていますから、管底にひずみが全くなく濁度の状態を正確に測定できます。安価な底板研磨なしもあります。

## 濁度用比色管・光学用比色管

## ■ 仕様

品名	規格	備考	コードNo.
濁度用比色管	100mL¥19/28(共栓付) 外径23.5mm 全長370mm	底板鏡面研磨	3121-04
光学用比色管	100mL 外径28mm 全長250mm	〃	3121-05
濁度用比色管	100mL¥19/28(共栓付) 外径23.5mm 全長370mm	底板研磨なし	3121-15

## 比色管架台(濁度用・光学用)

## ■ 仕様

品名	規格	穴径φmm	コードNo.
濁度用	12本立て 白・黒回転反射板付	25	3121-06
光学用	〃	30	3121-07

(材質はアクリル樹脂製)

## 透視比濁用暗箱

透視比濁用暗箱は、比色管を用いて比色する時に使用する暗箱で、下部に回転式反射板(白・黒アクリル樹脂製)を装着しています。また、下窓に蛍光灯を取り付けていますから、比色液がより一層、鮮明に観測できます。(本体は木製です)

## 暗箱(木製)

## ■ 仕様

型式	規格	架数	電源(AC)	コードNo.
TD-2	濁度用比色管100mL用 穴径25mm (370mm用)	2本架	100V	3132-2
TD-3	濁度用比色管100mL用 穴径25mm (370mm用)	3本架	〃	3132-3
TD-5	濁度用比色管100mL用 穴径25mm (370mm用)	5本架	〃	3132-5
TC-2	比色管100mL用 穴径30mm (300mm用)	2本架	〃	3133-2
TC-3	比色管100mL用 穴径30mm (300mm用)	3本架	〃	3133-3
TC-5	比色管100mL用 穴径30mm (300mm用)	5本架	〃	3133-5

(注)周波数をご指定ください。

濁度用比色管・光学用比色管・透視比濁用暗箱

コードNo.	品名／型式	規格	定価	
3121-04	濁度用比色管	100mL	※ お問い合わせください	
3121-05	光学用比色管	100mL		
3121-15	濁度用比色管	100mL 底板研磨なし		
3132-2	暗箱 木製 (濁度用比色管100mL用)	TD-2		2本架 穴径φ25mm (370mm用)
3132-3		TD-3		3本架 //
3132-5		TD-5		5本架 //
3133-2	暗箱 木製 (比色管100mL用)	TC-2		2本架 穴径φ30mm (300mm用)
3133-3		TC-3		3本架 //
3133-5		TC-5		5本架 //