



PW-12SA(セミオート式)

※溶出瓶の装着数は12本です。(500mL~2,000mLまで)

写真の溶出振とう試験装置と溶出瓶用カセット  
及び溶出瓶は別売です。

## ■ 特 長

## ● 注水ボトルを階段状に配置

注水ボトルに溶媒を充填し易いように階段式に配置しました。

## ● カップリングによる接続

注水ボトルと溶出瓶の間はチューブで接続し、途中にカップリングを設けており、溶出瓶の脱着が簡単に行えます。

## ● チューブクランプ式電磁弁

チューブクランプ式電磁弁の採用で、電磁弁からのコンタミネーションがありません。

## ● 積算カウンター装備

光電センサーにより、振とう台の動作を検出、積算カウンターで振とう回数をカウントします。

## ● デジタル式ウイークリタイマー


電磁弁と振とう器の動作時間の設定は、デジタル式ウイークリタイマーを採用していますので、設定の操作が簡単です。デジタル表示します。

## ■ 仕 様(セミオート式)


|             |  |
|-------------|--|
| 型 式         | PW-12SA  |
| コード No.     | 5003-02  |
| 注 水 ボ ト ル   | 2L×12本   |
| 注 水 用 電 磁 弁 | チューブクランプ式電磁弁 12個   |
| タイマー(3個)    | ・バルブ用ウイークリタイマー 1個<br>・振とう用ウイークリタイマー 1個<br>・手動時 振とう器タイマー 1個 |
| 積算カウンター     | 0~999999カウント(振とう回数カウント)                                    |
| 排水用タンク      | 10Lポリタンク 接続チューブ2m付   |
| 外形寸法        | (W)910×(D)555×(H)1600mm                                    |
| 電 源 ( A C ) | 100V-8A  |
| 質 量         | 40kg   |

※特注品(他メーカー振とう器用)も設計製作いたします。  
ご相談下さい。

(セミオート式)

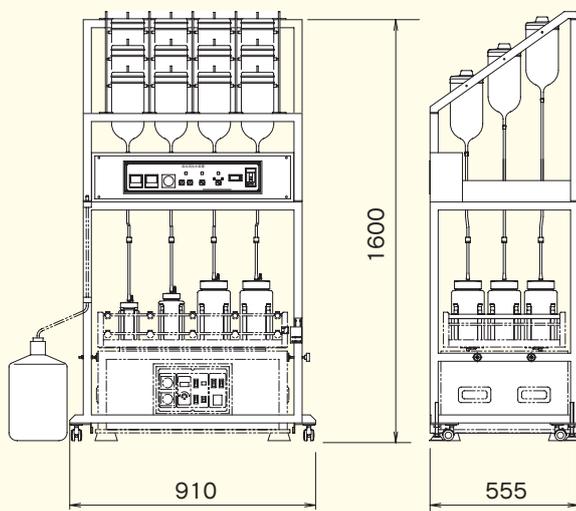

各種部品一覧表

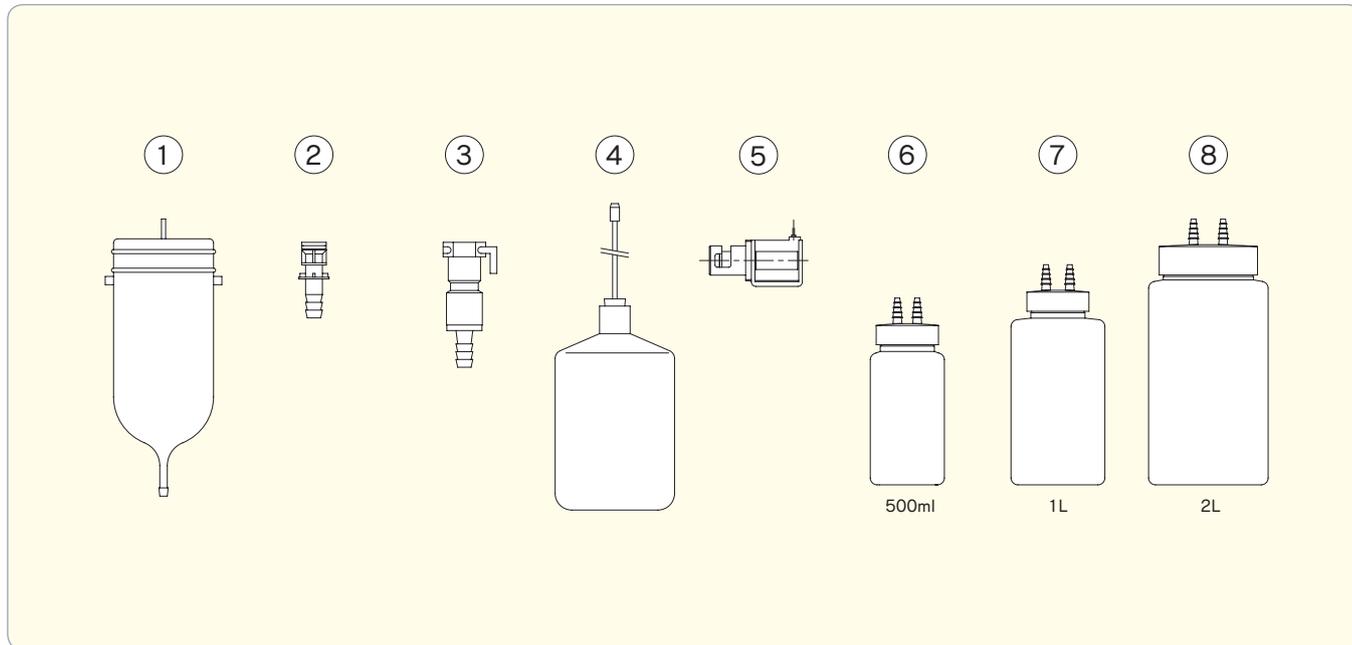

■ 溶出振とう自動注水装置 構成部品

| 図番 | 品名         | 規格                | 個数   | 備考    | コードNo.  |
|----|------------|-------------------|------|-------|---------|
| ①  | 注水ボトル      | 容量 2L             | 12 個 | ※     | 5003-51 |
| ②  | カップリング(オス) | 適合チューブ内径6.4mm     | 12 個 | ※     | 5003-52 |
| ③  | カップリング(メス) | 適合チューブ内径6.4mm、弁付き | 12 個 | ※     | 5003-53 |
| ④  | 排水用タンク     | 容量10L、排水チューブ付き    | 1 個  | ※     | 5003-54 |
| ⑤  | 電磁弁(自動注水用) | チューブクランプ式、AC100V  | 12 個 | ※     | 5003-57 |
| ⑥  | 溶出瓶 500ml  | ホースジョイント2個付き      | —    | オプション | 5003-58 |
| ⑦  | 溶出瓶 1L     | ホースジョイント2個付き      | —    | オプション | 5003-59 |
| ⑧  | 溶出瓶 2L     | ホースジョイント2個付き      | —    | オプション | 5003-60 |

備考欄の※印は標準付属品です。  
オプションの溶出瓶及び溶出瓶用カセットは、ご注文時にご希望の容量をご指定ください。

溶出瓶用カセット(オプション部品)



■カセットを揃えておかれると、とても便利です

溶出瓶用カセットを振とう台にセットしておけば、溶出瓶の交換が簡単に行えます。

■ 溶出瓶用カセット (SUS-304)

| コードNo.  | 5003-61                | 5003-62 | 5003-63 |
|---------|------------------------|---------|---------|
| 溶出瓶の容量  | 500mL                  | 1L      | 2L      |
| 溶出瓶の架数  | 3本                     |         |         |
| 溶出瓶の胴径  | φ75mm                  | φ95mm   | φ121mm  |
| 溶出瓶の胴高さ | 125mm以上                |         |         |
| 外形寸法    | (W)410×(D)160×(H)160mm |         |         |

溶出振とう自動注水装置

| コードNo. |    | 品名             | 型式      | 規格                 | 定価              |
|--------|----|----------------|---------|--------------------|-----------------|
| 5003-  | 02 | 溶出振とう自動注水装置    | PW-12SA |                    | ※<br>お問い合わせください |
| -      | 51 | 注水ボトル          |         | 容量 2L              |                 |
| -      | 52 | カップリング(オス)     |         | 適合チューブ内径φ6.4mm     |                 |
| -      | 53 | カップリング(メス)     |         | 適合チューブ内径φ6.4mm 弁付  |                 |
| -      | 54 | 排水用タンク         |         | 容量10L 排水チューブ付      |                 |
| -      | 57 | 電磁弁            |         | チューブクランプ式、AC100V   |                 |
| -      | 58 | 溶出瓶 500mL      |         | ホースジョイント2個付        |                 |
| -      | 59 | ” 1L           |         | ”                  |                 |
| -      | 60 | ” 2L           |         | ”                  |                 |
| -      | 61 | 溶出瓶用カセット 500mL |         | 胴径φ 75× 高さ125mm以上  |                 |
| -      | 62 | ” 1L           |         | 胴径φ 95× 高さ125mm以上  |                 |
| -      | 63 | ” 2L           |         | 胴径φ 121× 高さ125mm以上 |                 |