

上ふたのリングを交換すれば、COD測定用バスとして使用出来ます。



WL-15(電気)
(タイマー2個付き)

写真の容器類は付属しません

■ 特 長

● 頑丈で耐久性抜群！

内槽・外装共にステンレスの厚板使用。
ヘアライン加工で外観も品位ある美しさです。

● 安全対策も万全！

漏電ブレーカー装備。
自動空焚防止装置装備(フロート式)。
水位低下で、フロートスイッチが作動します。電源を自動的に遮断、
空焚きの心配がありません。同時にブザーでお知らせします。

● 便利なタイマーが2個付属

作業開始時間と運転時間が別々に設定可能
最大60時間設定可能です。



三段リング付



※別売

浮上防止板・容器バスケット

■ 特 記

水槽1台で2台分に活用することができます

COD測定用としてご使用の場合

浮上防止板と容器バスケットを別途お求めください。(上フタは共通です)。
三段リングを外し、浮上防止板と容器バスケットを装着すればCOD
測定用湯煎器として使用できます。

- 自動温度調節器
- 内槽・外装オールステンレス鋼板(SUS304)ヘアライン加工
- 最高使用温度100℃
- 始動・運転タイマー(最大60時間)
- 安全対策(漏電ブレーカー+自動空焚防止装置)

電気式

■ 仕 様

型 式	架 数	電 源 (AC)	内槽寸法 (W×D×H) mm	最大外寸法 (W×D×H) mm	質量 (kg)	コード No.
WL- 6	(2×3) 6個架	100V-20A	450×300×165	595×490×370	20.5	2403- 6
WL- 8	(2×4) 8個架	100V-25A	600×300×165	745×490×370	23.5	2403- 8
WL-10	(2×5) 10個架	100V-30A	750×300×165	895×490×370	25.5	2403-10
WL-12	(3×4) 12個架	100V-30A	600×450×165	745×640×370	28.0	2403-12
WL-15	(3×5) 15個架	100V-35A	750×450×165	895×640×370	31.5	2403-15
WL-18	(3×6) 18個架	100V-45A	900×450×165	1,045×640×370	35.0	2403-18
WL-21	(3×7) 21個架	100V-50A	1,050×450×165	1,195×640×370	39.0	2403-21

- 標準仕様の電源はAC100V圧着端子止めです。
- プラグ付をご希望の場合は、ご注文時に形状をご指定ください。
- AC200V(単相)仕様も承ります。
- 電源コード2m付
- 給水・排水ホースは付属しません。
- 最大外寸法は付属品等の突起部を含みません。

付属品

- 三段リング (SUS304)
- 温度計 150℃・30cm×1本
- ※ 棚板は付属していません。

理研式

COD測定湯煎器・角型湯煎器(部品) 棚板(上下可動式)



浮上防止板 フタ(浮上防止板用) 取手 バスケット 三段リング フタ(ジャンボバス用) フラスコキャッチャー

部品(湯煎器用)


品名	規格	材質	備考	コードNo.
浮上防止板(リング)	外径 128 × 内径 55 × 厚み 5mm	ステンレス製 (SUS-304)	取手付	2401-51
フタ(浮上防止板用)	外径 65mm	〃	つまみ付	2401-52
バスケット	内径 107 × H100mm	金属製	クロームメッキ付	2401-53
取手	樹脂部 70mm	樹脂製(芯棒付)	芯棒 (SUS-304)	2401-54
アルコール温度計	0 ~ 150℃ (棒状)	ガラス製	30cm	2401-55
フラスコキャッチャー	外径 64 × 内径 37 × 厚み 22mm	ステンレス製 (SUS-304)	取手付	2401-56
三段リング	大中小 三枚組	〃	外径 120・90・65mm	2403-51
フタ(ジャンボバス用)	外径 80mm (つまみ付)	〃	つまみ付き	2403-52

■ 電気定温湯煎器、ガス式湯煎器用棚板(上下可動式)

■ コンパクトバス 電気式・ガス式棚板



棚板(オプション)

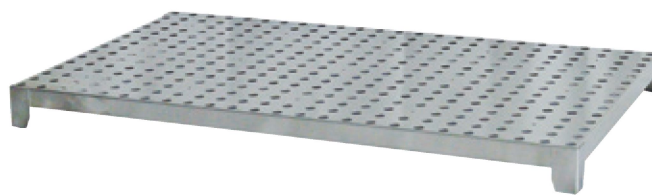

棚板(オプション)

● 棚板 電気定温湯煎器、ガス式湯煎器用 (上下可動式)SUS-304

棚板	寸法(W×D) mm	コード No.
6 個架用	445 × 295	2403- 53
8 個架用	595 × 295	2403- 54
10 個架用	745 × 295	2403- 55
12 個架用	595 × 445	2403- 56
15 個架用	745 × 445	2403- 57
18 個架用	895 × 445	2403- 58
21 個架用	1,045 × 445	2403- 59

● 棚板 コンパクトバス用 SUS-304

棚板	寸法(W×D) mm	コード No.
6 個架用	325 × 210	2501-51
8 個架用	440 × 210	2501-52
10 個架用	555 × 210	2501-53
12 個架用	440 × 325	2501-54
15 個架用	555 × 325	2501-55
18 個架用	670 × 325	2501-56
21 個架用	785 × 325	2501-57

1 水質試験機器

シエーカー機器

3 環境試験機器

4 薬科機器

5 バイオ機器

6 食品衛生機器

7 その他

電気定温湯煎器

コードNo.	品名	型式	規格	定価
2403-6	電気定温湯煎器 (タイマー2個付)	WL-6	電気式 6個架	※ お問い合わせください
-8		WL-8	〃 8個架	
-10		WL-10	〃 10個架	
-12		WL-12	〃 12個架	
-15		WL-15	〃 15個架	
-18		WL-18	〃 18個架	
-21		WL-21	〃 21個架	

COD測定湯煎器・角型湯煎器(部品)・棚板

2401-51	浮上防止板		外径128 × 内径55 × 厚み5mm	
-52	フタ		外径 65mm	
-53	バスケット		内径107 × H100mm	
-54	取手		樹脂部70mm 芯棒SUS-304	
-55	アルコール温度計		0~150℃ 30cm	
-56	フラスコキャッチャー		外径64 × 内径37 × 厚み22mm	
-51	三段リング		大中小 三枚組(SUS-304)	
2403-52	フタ		外径80mm つまみ付	

棚板

-53	湯煎器用棚板		6個架用	
-54	〃		8個架用	
-55	〃		10個架用	
-56	〃		12個架用	
-57	〃		15個架用	
-58	〃		18個架用	
-59	〃		21個架用	

棚板 コンパクトバス用

-51	コンパクトバス用 棚板		6個架用	
-52	〃		8個架用	
-53	〃		10個架用	
-54	〃		12個架用	
-55	〃		15個架用	
-56	〃		18個架用	
-57	〃		21個架用	