

## ガス式湯煎器

上ふたのリングを交換すれば、COD測定用バスとして使用出来ます。



WLG-15A(ガス)

## ■ 特 長

## ● 頑丈で耐久性抜群！

内槽・外装共にステンレスの厚板使用。  
ヘアライン加工で外観も品位ある美しさです。

## ● 安全対策も万全！

水槽はオーバーフロー付きです。  
水道水を直結、少量の水を出しておけば、常時一定の水位を保ち、空焚きの心配がありません。

## ● 放熱反射板装備

ガスバーナー下部に放熱反射板を装備、下部への不要な放熱を防ぎ、反射熱で水槽への昇温効果を高めます。

## ● ガス自動点火装置装備

スパーク点火式で、便利です。



三段リング付



※別売

浮上防止板・容器バスケット

## ■ 特 記

水槽1台で2台分に活用することができます  
COD測定用としてご使用の場合  
浮上防止板と容器バスケットを別途お求めください。  
(上ふたは共通です)  
三段リングを外し、浮上防止板と容器バスケットを装着すればCOD測定用湯煎器として使用できます。

- 内槽・外装オールステンレス鋼板(SUS304)ヘアライン加工
- ガス自動点火装置付(スパーク式)
- オーバーフロー式空焚防止装置
- ガスバーナー放熱反射板装備
- 温度計付属(150℃ 30cm)

## ガス式

## ■ 仕 様

型 式	架 数	ガス供給口	内槽寸法(W×D×H)mm	最大外寸法(W×D×H)mm	質 量	コード No.
WLG- 6A	(2×3) 6個架	1個	515×365×145	810×395×420	20.5kg	2404- 6
WLG- 8A	(2×4) 8個架	1個	665×365×145	950×395×420	23.5kg	2404- 8
WLG-10A	(2×5) 10個架	1個	815×365×145	1,100×395×420	25.5kg	2404-10
WLG-12A	(3×4) 12個架	1個	665×515×145	950×540×420	28.0kg	2404-12
WLG-15A	(3×5) 15個架	1個	815×515×145	1,100×540×420	31.5kg	2404-15
WLG-18A	(3×6) 18個架	1個	965×515×145	1,240×540×420	35.0kg	2404-18
WLG-21A	(3×7) 21個架	1個	1,115×515×145	1,390×540×420	39.0kg	2404-21

●ガスの種類はご注文時に必ずご指定ください。 ※ご使用時には、換気に十分ご注意ください。

●給水・排水ホース及びガスホースは付属しません。 ●最大外寸法は、点火装置を含みます。

## 付属品

●三段リング(ステンレス) ■ガス放熱反射板(ガスバーナー下部に付属) ■温度計 150℃・30cm×1本

※棚板は付属していません。

理研式

# COD測定湯煎器・角型湯煎器(部品) 棚板(上下可動式)



浮上防止板      フタ(浮上防止板用)      取手      バスケット      三段リング      フタ(ジャンボバス用)      フラスコキャッチャー

## 部品(湯煎器用)


品名	規格	材質	備考	コードNo.
浮上防止板(リング)	外径 128 × 内径 55 × 厚み 5mm	ステンレス製 (SUS-304)	取手付	2401-51
フタ(浮上防止板用)	外径 65mm	〃	つまみ付	2401-52
バスケット	内径 107 × H100mm	金属製	クロームメッキ付	2401-53
取手	樹脂部 70mm	樹脂製(芯棒付)	芯棒 (SUS-304)	2401-54
アルコール温度計	0 ~ 150℃ (棒状)	ガラス製	30cm	2401-55
フラスコキャッチャー	外径 64 × 内径 37 × 厚み 22mm	ステンレス製 (SUS-304)	取手付	2401-56
三段リング	大中小 三枚組	〃	外径 120・90・65mm	2403-51
フタ(ジャンボバス用)	外径 80mm (つまみ付)	〃	つまみ付き	2403-52

## ■ 電気定温湯煎器、ガス式湯煎器用棚板(上下可動式)

## ■ コンパクトバス 電気式・ガス式棚板



棚板(オプション)

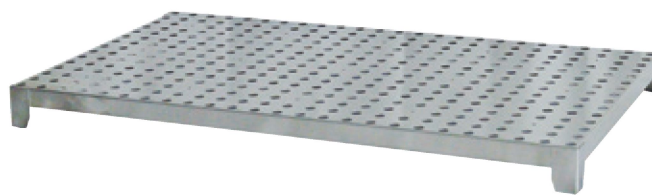

棚板(オプション)

### ● 棚板 電気定温湯煎器、ガス式湯煎器用 (上下可動式)SUS-304

棚板	寸法(W×D) mm	コード No.
6 個架用	445 × 295	2403- 53
8 個架用	595 × 295	2403- 54
10 個架用	745 × 295	2403- 55
12 個架用	595 × 445	2403- 56
15 個架用	745 × 445	2403- 57
18 個架用	895 × 445	2403- 58
21 個架用	1,045 × 445	2403- 59

### ● 棚板 コンパクトバス用 SUS-304

棚板	寸法(W×D) mm	コード No.
6 個架用	325 × 210	2501-51
8 個架用	440 × 210	2501-52
10 個架用	555 × 210	2501-53
12 個架用	440 × 325	2501-54
15 個架用	555 × 325	2501-55
18 個架用	670 × 325	2501-56
21 個架用	785 × 325	2501-57

1 水質試験機器

シエーカー機器

3 環境試験機器

4 薬科機器

5 バイオ機器

6 食品衛生機器

7 その他

## ガス式湯煎器

コードNo.	品名	型式	規格	定価
2404-6	ガス式湯煎器	WLG-6A	6個架	※ お問い合わせください
-8		WLG-8A	8個架	
-10		WLG-10A	10個架	
-12		WLG-12A	12個架	
-15		WLG-15A	15個架	
-18		WLG-18A	18個架	
-21		WLG-21A	21個架	

### COD測定湯煎器・角型湯煎器(部品)・棚板

2401-51	浮上防止板		外径128 × 内径55 × 厚み5mm	
-52	フタ		外径 65mm	
-53	バスケット		内径107 × H100mm	
-54	取手		樹脂部70mm 芯棒SUS-304	
-55	アルコール温度計		0~150℃ 30cm	
-56	フラスコキャッチャー		外径64 × 内径37 × 厚み22mm	
-51	三段リング		大中小 三枚組(SUS-304)	
2403-52	フタ		外径80mm つまみ付	

### 棚板

-53	湯煎器用棚板		6個架用	
-54	"		8個架用	
-55	"		10個架用	
-56	"		12個架用	
-57	"		15個架用	
-58	"		18個架用	
-59	"		21個架用	

### 棚板 コンパクトバス用

-51	コンパクトバス用 棚板		6個架用	
-52	"		8個架用	
-53	"		10個架用	
-54	"		12個架用	
-55	"		15個架用	
-56	"		18個架用	
-57	"		21個架用	